

# КОСТНЫЕ ИГЛЫ

## NAXI - стерильная игла для аспирации КОСТНОГО МОЗГА


Предназначена для аспирации костного мозга из грудинной, крестцовой и подвздошной костей.

Конструкция кончика гарантирует атравматичность проведения процедуры.

Механизм регулируемой длины иглы с миллиметровой шкалой позволяет установить глубину введения, а также расширяет область применения инструмента.

Замок с блокирующим кольцом на крышке стилета обеспечивает надежную фиксацию конструкции для безопасности процедуры.

Проксимальный конец канюли оснащен металлическим коннектором Луер-Лок для присоединения шприца.

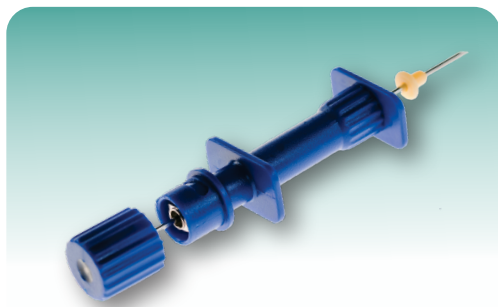

### NAXI - стандартная модель

Кат. № NAXI	Размеры NAXI (G x мм)	Кол-во штук в упаковке
NAXI 1401	14 x 10-44	10
NAXI 1403	14 x 25-60	10
NAXI 1501	15 x 10-44	10
NAXI 1503	15 x 25-60	10
NAXI 1601	16 x 10-44	10
NAXI 1603	16 x 25-60	10
NAXI 1801	18 x 10-44	10
NAXI 1803	18 x 25-60	10



### NAX - специальная модель

Кат. № NAX	Размеры NAX (G x мм)	Кол-во штук в упаковке
NAX 1404	14 x 37-71	10




#### Специальная модель

2 поперечные прорези на конце иглы для дополнительной аспирации

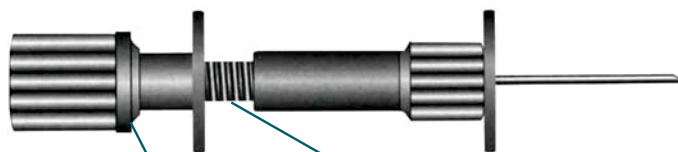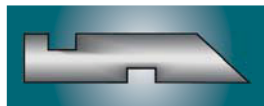

Шкала регулировки глубины

Металлический коннектор

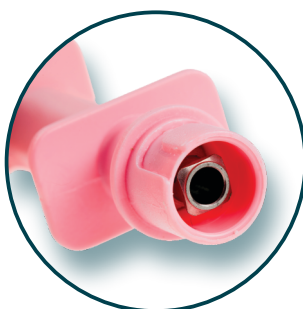

#### Характеристики:

- \* лазерная заточка
- \* стальной коннектор Луер-Лок
- \* замок на крышке рукояти
- \* регулировка глубины ввода
- \* миллиметровая шкала
- \* пластиковый ограничитель
- \* цветная маркировка диаметра
- \* стерильная упаковка
- \* пластиковый защитный тубус